



今年もやります！年度末 短納期キャンペーン

弊社通常価格から無償で短納期サービスにアップグレード！

FAST



プロモーションコード：
JPFY22ENDFAST

アゼンタ国内ラボ サンプル最終到着日

- 3月3日：RNA-Seq
- 3月10日：レーン専有シーケンシング

* 3月31日までに納品ご希望の場合の最終提出期限です

2023年3月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

* サンプル送付までに、オンラインでの見積依頼～発注の確定とサンプル情報シートのご提出が必要です

レーン専有シーケンシング illumina HiSeq / NovaSeq

納期 5-7営業日

HiSeq レーンあたり **188,000円** (税込206,800円)

NovaSeq レーンあたり **945,000円** (税込1,039,500円)

- 調製済みライブラリ提出 (レーン単位であらかじめプール)
濃度：>5 nM (推奨>15 nM)、液量20 µl、ライブラリ断片サイズ：400-700 bp程度
- 2x 150 bp、レーンあたりのデータ出力目安 HiSeq: 100 Gb、NovaSeq: 600-750 Gb
- 国内・海外送料無料、QC料金別途 (税込6,380円/プール)、ダウンロード納品 (料金は裏面参照)

RNA-Seq ライブラリ調製～シーケンシング

6サンプル以上でよりお得！

サンプルあたり **~42,000円** (税込46,200円)

納期 8-12営業日

- 精製済みトータルRNA提出
総量：>2 µg、濃度：50 ng/µl、液量：>20 µl、OD260/OD280：1.8-2.2
- poly-A選択；ストランド特異的ライブラリ調製、サンプルあたり6 Gb (2,000万ペアエンドリード)
- 国内・海外送料無料、生データFASTQ納品、ダウンロード納品 (料金は裏面参照)




サービスの流れ



1

オンラインでの見
積依頼と発注
プロモーションコー
ドのご入力をお忘れ
なく。

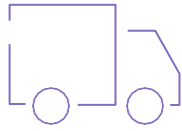

2

サンプル発送
サンプル情報シート
が必要です。



3

サンプル品質確認
短納期サービスでは
ガイドラインを満た
していることが必須
となります。



4

シーケンシング
調製済みライブラリ
ご提出の場合は、
データ出力は目安と
なります。



5

ダウンロード納品
ハードディスク納品
ご希望の場合は納期
に別途5営業日かか
ります。

諸注意事項

短納期キャンペーン共通：

- オンライン見積依頼時にプロモーションコードの入力が必須です。
- アゼンタ中国蘇州ラボでのサービスによる期間限定キャンペーンです。有効期限は、本誌表に記載のアゼンタ国内ラボサンプル最終到着日に準じます。
- アゼンタ国内ラボから中国蘇州ラボへの輸送に約5営業日かかります。
- 海外輸送、通関手続きに伴うサンプル損失・遅延の責任は負いかねます。
- サンプル提出ガイドライン厳守。ガイドラインに満たない場合は、通常納期での対応となります。
- ご提出サンプルの返却はいたしません。
- 納期はサンプルの品質確認が完了してからの土日祝日（日本）を除く営業日数です。
また、データダウンロードのご案内とメールによるデータ確認レポートの送付をもって納品とさせていただきます。
- 品質確認後、サンプルに問題ない場合は、お客様へのご報告を待たず、先に進めさせていただく場合がございます。
- ダウンロードでの納品費用はデータ量に応じて異なります。
<240 Gb：5,830円 240-480 Gb：13,860円 480-800 Gb：20,790円 いずれも税込
- ハードディスク納品ご希望の場合、追加で納期5営業日が必要です。また、容量に応じ料金が異なります。
1 Tb：13,860円 2 Tb：26,070円 4 Tb：34,650円 いずれも税込

レーン専有シーケンシング：

- レーン単位であらかじめライブラリをプールしてご提出ください。
- インデックスの重複にご注意ください（標準で1 bpのミスマッチを許容してデマルチプレックスします）。
- プールせずにご提出の場合、通常納期での対応に変更、また、ライブラリごとに6,380円（税込）の品質確認費用がかかります。
- 出力データ量は、ライブラリの性質に影響を受けるため、目安であり保証値ではございません。

RNA-Seq ライブラリ調製～シーケンシング：

- データ解析をご希望の場合、別途費用と追加で5-10営業日がかかります。
- Poly-A選択法以外（rRNA枯渇法等）をご希望の場合は、通常納期での対応となります。
- データ量の変更は可能です（短納期サービス範囲内）。オンライン見積依頼時にご指定ください。
- サンプル数に応じてバルクディスクカウントを適用します。
1-5サンプル：46,200円 6-47サンプル：40,920円 48サンプル以上：38,280円 いずれも税込

©2023 Azenta Life Sciences, Inc. 本サービスは研究用のみに使用できます。診断目的に使用することはできません。
当印刷物に記載されている会社名および商品名などは、各社の商標または登録商標です。本印刷物記載の内容は2023年2月現在のものです。



アゼンタ株式会社（旧社名 日本ジーンウィズ株式会社）
〒142-0043 東京都品川区二葉二丁目9番15号 NFパークビルディング 4F
電話：03-6628-2950 FAX：03-6628-2951 メール：sales.japan@azenta.com

代理店・取扱店記入欄